

WILLI GELLER
Creation
SIMPLY BRILLIANT

Creopal Denti artificiali



Esclusiva linea di denti in composito: un variegato gioco di forme e colori

Molto estetici, economici, naturali e funzionali: Creopal è un sistema di denti in composito caratterizzato da un'elevata resistenza, frutto della collaborazione interculturale tra odontotecnici europei e asiatici. La gnatologia e la tessitura superficiale dei denti anteriori sono state concepite da Willi Geller nell'ambito di un progetto pluriennale, mentre i denti posteriori sono stati sviluppati, tra gli altri, da Yasuhiro Odanaka.

Le dieci forme dei denti anteriori e le cinque forme dei denti laterali per mascellare superiore e mandibola, perfettamente coordinate, colpiscono innanzitutto per la loro morfologia naturale e per la tessitura superficiale, oltre che per l'eccezionale lucentezza. Grazie a una distribuzione equilibrata del riempitivo, i denti artificiali altamente compressi vantano un'elevata resistenza all'abrasione e alla flessione.

Minimo spessore – massimo risultato

Dell'esclusiva linea di denti artificiali fanno parte anche le faccette in composito multifunzionali per denti anteriori e posteriori. Nonostante lo spessore estremamente sottile, queste


«shell Creopal» permettono di ottenere lo stesso effetto cromatico e lo stesso valore di luminosità dei denti totalmente anatomici, per un risultato da maestro!

Adattabili singolarmente e utilizzabili per diverse indicazioni:

per un adattamento cromatico ottimale ai materiali sintetici e alla ceramica, il sistema Creopal è disponibile in 16 colori Vita® e due tonalità Bleach. Le shell Creopal sono disponibili in una gamma cromatica ridotta. I denti artificiali, realizzati mediante un processo a quattro strati, e le faccette Creopal (a due strati) sono ideali non solo come protesi parziali, combinate, implantari e totali, ma anche come strumenti di set-up o mock-up per le prove estetiche e per la pianificazione a ritroso (backward planning). Le forme lievemente rettangolari dei denti possono essere facilmente personalizzate e combinate, senza influire negativamente sull'estetica.

Denti e faccette Creopal: economici ed estetici fin nel minimo dettaglio!

WILLI GELLER
Creopal – Per facilitarvi il lavoro e rendere più felici i vostri pazienti ...

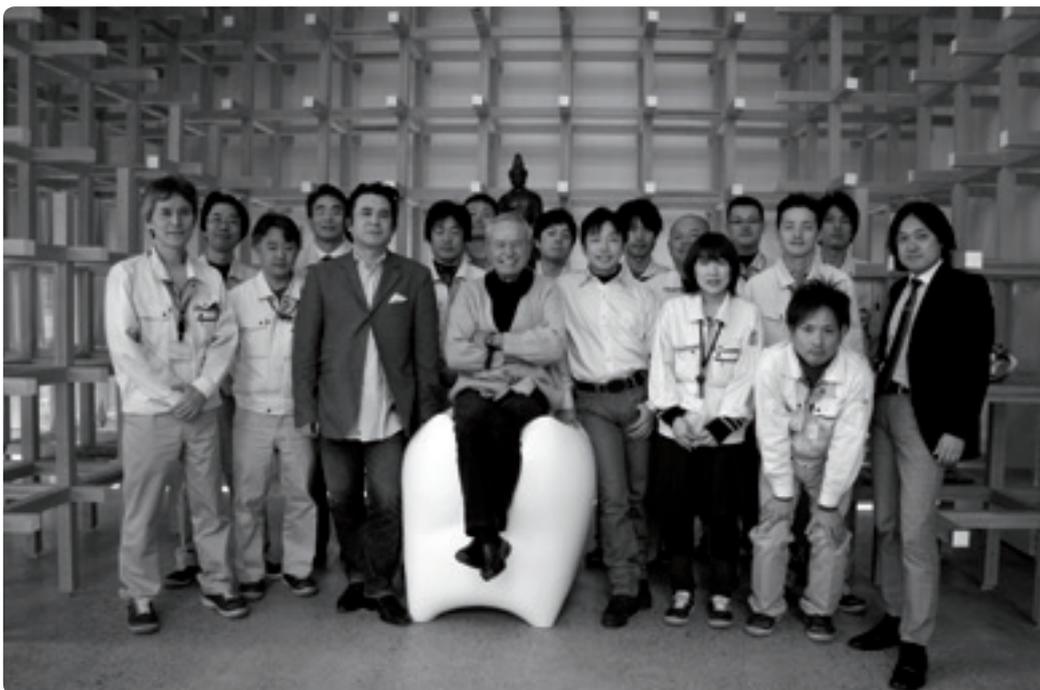

... un team di esperti di Asia ed Europa ha creato la combinazione perfetta di denti artificiali e faccette/veneer identiche corrispondenti, grazie all'utilizzo di materiali high-tech all'avanguardia: acrilico e composito.

La sua unicità a livello internazionale rende questo prodotto »THE ONE «.



Enjoy »THE ONE «

WILLI GELLER
Creopal SHELL | FULLCONTOUR



I VANTAGGI DI CREOPAL E CREOPAL SHELL:

- Denti artificiali e veneer in composito, naturali e indipendenti dal sistema
- Forme con una più elevata opalescenza e fluorescenza, per un migliore dinamismo luminoso
- Forme di base rettangolari facilmente personalizzabili senza perdita cromatica
- Spazi interdentali chiusi per una disposizione e una configurazione delle papille naturali
- Forma, colore e luminosità identici per denti realizzati in multistrati e faccette
- Per applicazioni universali per protesi parziali, combinate, implantari e totali

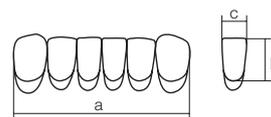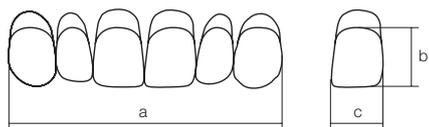

Tipo AU

Denti anteriori superiori

Tipo AL


Denti anteriori inferiori

• Creopal – shell

• Creopal – full contour



a 28,0
b 29,0
c 9,9
d 9,3

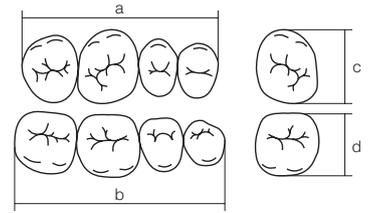

Punto di contatto nel rapporto oclusale

Intercuspidazione piana

Calotta: 140

Grazie alla forma anatomica e all'inclinazione dei tubercoli, questa linea è indicata sia per le tecniche combinate che per le protesi totali.



a 30,0
b 31,1
c 10,6
d 10,0
a 30,0
b 31,1
c 10,6
d 10,0



a 32,0
b 33,2
c 11,3
d 10,7
a 32,0
b 33,2
c 11,3
d 10,7



a 34,0
b 35,3
c 12,1
d 11,3
a 34,0
b 35,3
c 12,1
d 11,3



a 36,5
b 39,4
c 12,2
d 12,1

CREOPAL: SHELL E FULL CONTOUR

shell anterior	X	X	X	X	-		X	X	X	-		-	-	-	-		-	-	-	-	X
shell posterior	X	X	X	X	-		X	X	X	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
full anterior	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
full posterior	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	-	-

Vantaggi di Creopal e Creopal Shell:

- La tecnica a quadruplo strato consente la creazione di un dente protesico identico a quello naturale
- La tecnica dello strato intermedio con un aumento di opacità garantisce l'aspetto naturale delle faccette di composito.
- Profondità cromatica dinamica grazie ai nuclei di dentina con strutture di mammelloni e alla massa incisale opalescente altamente cromatici.
- Aumento della massa incisale per una caratterizzazione o modifica dimensionale senza perdita cromatica
- Gli spazi interdentali consentono applicazioni personalizzate e agevolano la caratterizzazione gengivale naturale
- Eccellente fotoconducibilità grazie all'opalescenza, alla fluorescenza e alla traslucenza naturali
- La speciale morfologia della superficie consente una rifrazione naturale della luce
- Elevato grado estetico con forme espressive; gamma ridotta di forme ampliabile in modo personalizzato (meno giacenze di magazzino!)
- Elevata resistenza dell'adesione sul materiale protesico di base
- Nessun deposito di placca grazie alla superficie omogenea
- Nessuna usura degli antagonisti naturali

Principi di montaggio:

- Adatti per tutti i comuni concetti di montaggio secondo le regole della guida meccanica dente/articolare
- Impostazione con rapporto di dente a dente o di dente a due denti
- Occlusione equilibrata

Applicazioni per Creopal e Creopal Shell:

Pianificazione e provvisori

- Set-up per la pianificazione a ritroso (backward planning) nel caso di restauri complessi
- Mock-up per restauri provvisori di breve durata
- Restauri provvisori di lunga durata (corone singole e ponti)
- Corone a giacca

Tecnica combinata

- Lavori telescopici
- Restauri a barra
- Impianti
- Protesi parziali

Protesi totali